



Viva LIFT!™

POWER RECLINERS

By Pride® Mobility Products Corp.

2023

**NEUE
Kollektion!**



SCOTT MEUSER
CHAIRMAN & CEO
PRIDE MOBILITY®

Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der Branche der elektrischen Aufstehsessel wissen wir, dass es bei unserem Geschäft um Sie, unseren Kunden geht. Wir fühlen uns geehrt, wenn Sie sich für einen unserer elektrisch verstellbaren Aufstehsessel entscheiden, denn wir wissen, dass er zu Ihrem Lebensstil und Ihrer Einrichtung passen muss.

VivaLift!® Ist die Krönung Ihres direkten Feedbacks. Sie haben sich luxuriösen Komfort, außergewöhnliche Qualität, modernste Funktionen und elegantes Design gewünscht. Über einen Zeitraum von zwei Jahren haben wir zugehört und verfeinert. Das Ergebnis ist die VivaLift!® Linie der elektrisch verstellbaren Aufstehsessel, die für Sie, Ihr Zuhause und Ihren Lebensstil entwickelt wurde.

Wir wissen, dass die Anschaffung eines elektrisch verstellbaren Aufstehsessels nicht nur eine Anschaffung, sondern eine Investition ist - in Ihren Komfort, Ihre Einrichtung und Ihren Lebensstil. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass Sie, unser Kunde, es uns ermöglicht haben, diese wichtigen Ziele durch VivaLift!® zu erreichen.

A handwritten signature in black ink, reading "Scott Meuser". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal line extending to the right.



INHALT

- 3 Einführung
- 7 Ultra
- 9 Rise
- 11 Cozy
- 14 Technische Daten

PRIDE[®]
MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST[®]



ELEKTRISCHE KOPFSTÜTZE

UNABHÄNGIGE FUNKTIONEN

-  1. Die elektrische Kopfstütze hebt Ihren Kopf, Nacken und Ihre Schultern für maximale Unterstützung an.
-  2. Die Aufstehhilfe bietet eine bequeme Unterstützung für das Ein- und Aussteigen aus dem Aufstehsessel.
-  3. Mit der elektrischen Lendenwirbelstütze können Sie Ihren Komfort individuell anpassen.
-  4. Mit der Fußstützenverlängerung können Sie sich entspannt und vollständig ausstrecken.



AUFSTEHHILFE



LENDENWIRBELSTÜTZE

3

FUSSSTÜTZEN
VERLÄNGERUNG

4.

RÜCKENLEHNE

5.

USB
FERNBEDIENUNG

7.

DER BEQUEMSTE ELEKTRISCHE AUFSTEHSESSEL DER WELT!

STUFENLOSE POSITION

6.


STANDARD FUNKTIONEN



7. Mit der USB-Fernbedienung stellen Sie alle Funktionen unabhängig voneinander ein und können Ihr Smartgerät aufladen.



8. Eine Lithium-Batterie sorgt dafür, dass Ihr Aufstehsessel auch bei Stromausfall betriebsbereit ist.

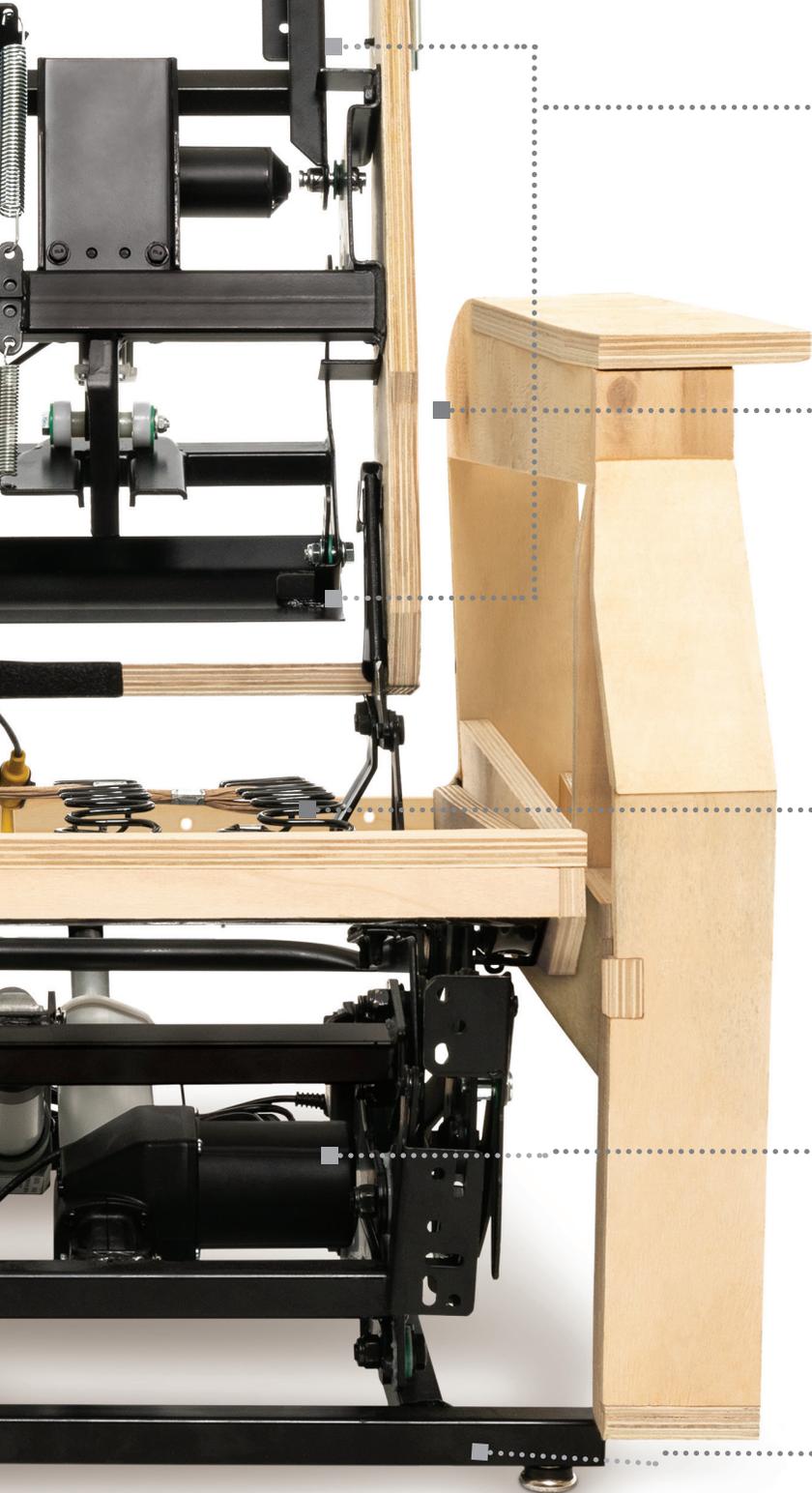

MIT PATENT ANGEMELDETEM KOPFSTÜTZEN-/LENDENWIRBEL-MECHANISMUS

Unabhängige Bedienung der Kopfstützen- und Lendenwirbelfunktionen für eine verbesserte Unterstützung von Kopf, Nacken und Rücken.

Einklemmschutz an der Kopfstütze zur Sicherheit.

STABILER HOLZRAHMEN

Hochwertiges Hartholz in Möbelqualität ist robust, widerstandsfähig und langlebig.



STAHL SITZRAHMEN

Die Federn sind an einem hochbelastbaren Stahlrahmen befestigt.

KOMFORT-BESTUHLUNG

Gewundene Federn mit kunststoffummantelten Clips sind am Morley-Scharnier befestigt.

LIFT - UND NEIGEMOTOREN

Den Aufstehsessel unabhängig einstellen, um eine entspannte, zurückgelehnte, flach liegende oder nach oben angehobene Position zu erreichen.

STAHLRAHMEN

Robustes Metallgestell, geschmiedet für eine lange Lebensdauer.



SITZPOLSTER

Die großzügige Füllung bietet maximale Unterstützung und Polsterung.

STOFF

Weiche, komfortable, luxuriöse Stoffe sind ebenso langlebig, wie stilvoll. Getestet nach kommerziellen Standards, garantiert langlebig.

LITHIUM BATTERIE BACKUP

Stellt sicher, dass der Stuhl betriebsbereit ist, wenn der Strom ausfällt.



FARB BESCHICHTETE MOTORANSCHLÜSSE MIT VERRIEGELUNGSKLAMMER

Langlebige Steckverbinder sorgen für einen reibungslosen und sicheren Betrieb.





ULTRA





Highlights

Tauchen Sie ein in puren Komfort und Luxus mit unserem erstklassigen Aufstehsessel. Ausgestattet mit einer vielseitigen Fünfmotor-Technologie bietet er nicht nur eine wohltuende Massagefunktion, sondern auch eine individuell einstellbare Sitzposition. Die integrierte Sitzheizung sorgt zudem für wohlige Wärme und rundet das perfekte Entspannungserlebnis.

- Fünfmotorig
- Massagefunktion mit drei Stufen
- Sitzheizung mit drei Stufen
- Memory-System (Einspeichern der Sitzposition)
- Integrierter Getränkehalter
- Unabhängige Kopfstütze und Lendenwirbelstütze
- Mobiltelefon Kabellosladestation
- Sitzbreite: S: 572 mm L: 584 mm
- Sitztiefe: S: 533 mm L: 558 mm
- Max. Belastbarkeit: 181 kg



BEZUG: STOFF



Dove

Verfügbar in Größe
S & L



Smoke

Verfügbar in Größe
S



RISE





Highlights

Der Rise Aufstehsessel vereint zeitloses Design und intelligente Funktionalität in einem. Dank seiner innovativen Technologie erleben Sie sanftes Aufstehen und Hinsetzen, während die Zweifarbigkeit Ihr Wohnambiente mit einer modernen Note bereichert.

- TRU-Motion Aufstehsessel
- Schnelle und einfache Bedienung
- Kopfstützen- und Lendenwirbelsäulensystem
- Stahl-Sitzkasten
- Fußstützen-Verlängerung
- All-Close Taste (Zurück zur Startposition)
- Einfache Handsteuerung mit USB-A-Anschluss
- Ästhetisches Design
- Sitzbreite: 508 mm
- Sitztiefe: 520 mm
- Max. Belastbarkeit: 158 kg

BEZUG: STOFF



Smoke &
Saddle



COZY





Highlights

Unser kompakter Relaxsessel bietet maximalen Komfort und minimale Anstrengung. Platzsparend und elegant – eine smarte Bereicherung für Ihr Zuhause.

- Power Layflat Mechanismus erlaubt unendlich viele Positionen zum Entspannen
- Drehbare 360° Basis
- Stahl-Sitzkasten
- Strombetriebenes Kopfstützen- und Lendenwirbelsäulensystem
- Fußstützen-Verlängerung
- All-Close Taste (Zurück zur Startposition)
- Seitenschalter mit USB-Anschlüssen
- Ästhetisches Design
- Sitzbreite: 533 mm
- Sitztiefe: 533 mm
- Max. Belastbarkeit: 158 kg

BEZUG: STOFF



Smoke



Olive



KOLLEKTION	Ultra (S)	Ultra (L)	Rise	Cozy
Artikelnummer	Smoke: HHC-PLR4955S-F385 Dove: HHC-PLR4955S-F387	HHC-PLR4955L-F387	HHC-495-4-3FL-F385	Smoke: HHC-C00058-4- Z3PF385 Olive: HHC-C00058-4- Z3PF383
BELASTBARKEIT	181 kg	181 kg	158 kg	158 kg
SITZHÖHE	533 mm	533 mm	495 mm	508 mm
SITZTIEFE	533 mm	558 mm	520 mm	533 mm
SITZBREITE	572 mm	584 mm	508 mm	533 mm
VOLLSTÄNDIG GEPOLSTERTE SITZFLÄCHE	Ja	Ja	Ja	Ja
FUSSSTÜTZEN VERLÄNGERUNG	Standard	Standard	Ja	Ja
SESSELHÖHE	1041 mm	1193 mm	1092 mm	1066 mm
ABSTAND ZUR WAND (AUFGRUND DER MÖGLICH- KEIT DES VERSTELLENS DER RÜCKENLEHNE)	381 mm	546 mm	640 mm	180 mm
GESAMTBREITE	939 mm	990 mm	1003 mm	812 mm
SESSELGEWICHT	71 kg	79 kg	78 kg	64,4 kg

1. Das kabellose Ladegerät ist nur mit Smartphones kompatibel, die über eine kabellose Ladefunktion verfügen. Außerdem sollten keine anderen intelligenten Geräte (z. B. Smartwatches) mit dem kabellosen Ladegerät verwendet werden.
2. Die Höhenbereiche sollten aufgrund der unterschiedlichen Faktoren jedes einzelnen Benutzers nur als Richtwert verwendet werden.

Nicht alle Geräte erreichen alle Positionen. Bitte beziehen Sie sich auf das jeweilige Produkt.

Hinweis: Die Maße können um +/- 1mm variieren. Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die hierin enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt; wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

PRIDE[®]
MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST[®]

Viva LIFT![®]
POWER RECLINER COLLECTION

05257/94789-0 | Hövelrieger Str.28, 33161 Hövelhof | pridemobility.de | info@pridemobility.de

CE

DE_PBV0001/RevB/SEP2023